

マインドバランスチェッカー J558



製品概要

マインドバランスチェッカーJ558は、自律神経の状態を測定し、自律神経のバランスと活性度を数値化することで、現在のマインドバランスを総合的に確認できる機器です。

本機器を使用することにより、

- ・一分間の脈拍数
- ・マインドバランス(自律神経(交感神経/副交感神経)のバランス)と活性度
- ・ストレス度
- ・血管年齢(血管のやわらかさ)


がコメントとグラフにて確認可能です。

測定は指先に測定用のセンサーを装着し、一分間の測定時間内にて脈拍一拍あたりの長さがどのように変動したかのデータを取得することで行われます。

測定結果は画面表示に加え、表示されたQRコードをスマートフォンの専用アプリで読み取ることで 個人ごとの測定結果を保存することができます。

また、測定結果を保存することで過去の測定結果との比較を行うことができ、ストレス状態や活性度の変化を確認することが可能です。

測定例

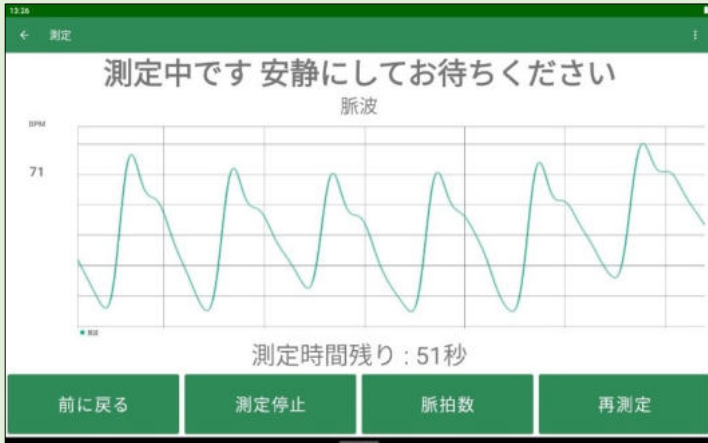


脈波測定中画面

脈波測定中の画面になります。



測定結果表示画面

測定終了後に表示される画面です。ストレス度、活性度、自律神経年齢、血管年齢、自律神経の総合評価結果が表示されます。

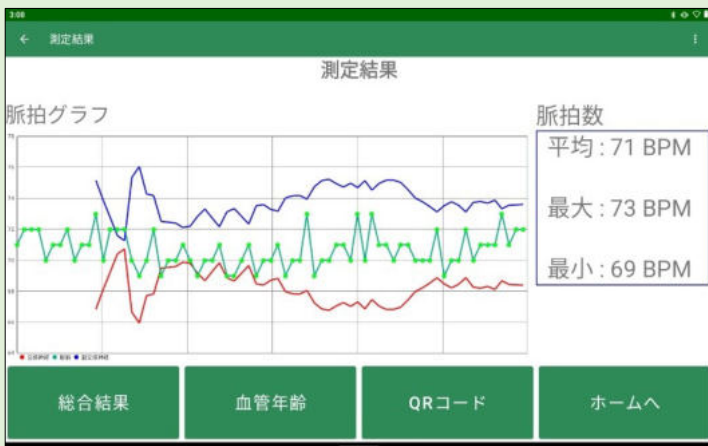

脈拍／自律神経の変動グラフ

測定終了後に平均／最大／最小の脈拍値と交感神経／副交感神経の測定中にどう変動していたかを確認することが可能です。



主な仕様

- 付属品 : 取扱説明書、USBケーブル
 - 寸法 (mm) : 横115 x 縦67 x 厚さ28 (センサー及びコネクタ部除く)
 - 電源 : USBケーブルによる電源供給
- ※測定には専用アプリケーションをインストールしたタブレット (別売) が必要です。

マインドバランスチェッカー J558

一般医療機器 クラス I
 一般医療器届出番号: 10B3X10007000003
 特定保守管理医療機器

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

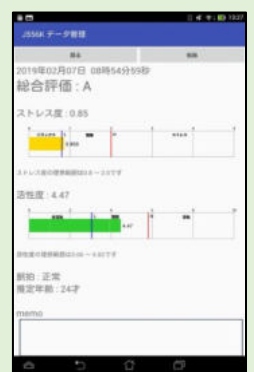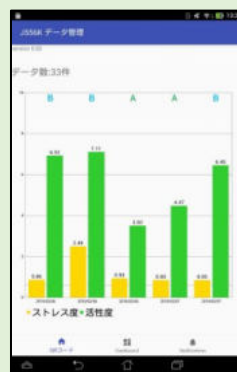

スマートフォン専用アプリで測定結果の保存、比較が可能です



株式会社ワークジョイ

〒374-0042 群馬県館林市近藤町592-5
 Tel:0276-75-8471 Fax:0276-75-8472
<https://www.workjoy.co.jp>
 Email: somu@workjoy.co.jp